


Instrucciones para Remisión de Citologías, Tejidos y Cadáveres

- Empaquetar los frascos en 1 caja **resistente** (si no, se pueden romper frascos y mezclarse muestras de varios casos o perderse biopsias) y **hermético** que impida filtración de líquidos
- **Usar un único frasco por caso si es posible** (no remitir órganos por separado si no es por una causa mayor que así lo requiera). Las **biopsias de piel pareadas en aves** deben remitirse por separado debidamente etiquetadas como "afectada" y "sana".
- **No colocar esparadrapo ni otro tipo de cintas en la tapa de los frascos** (demora el trabajo, no evita el derrame de formol y se pegan en los guantes)
- El **grosor máximo** de las muestras debe ser generalmente de **5 mm**, si no su fijación es inadecuada. No remitir cadáveres enteros, excepto animales de tamaño de un canario o inferior, que deben abrirse para exponer completamente las cavidades e inyectar formol en el tracto digestivo. No remitir muestras de varios animales en un mismo frasco.
- Fijar las muestras con **formol al 10%** tamponado (el formol puro comercial es del 37-40% y es ésta la solución que debe diluirse al 10%)
- **Relación formol:muestra** debe ser de **9:1** durante las primeras 24-48 horas y después las muestras pueden remitirse con menos formol; no enviar cantidades excesivas de formol ya que el reciclaje de este tóxico es de elevado costo económico. **Para envíos por avión** recomendamos eliminar casi todo el formol si se han fijado las muestras más de 2/3 días y cubrirlas con una gasa humedecida en formol; para estos envíos **deben emplearse un mínimo de 3 niveles de aislamiento** (por ejemplo: frasco + bolsa hermética + caja impermeable).
- Las **citologías y preparaciones histológicas** deben remitirse protegidas en contenedores de plástico apropiados para evitar que se rompan (por ejemplo, no envolverlas en papel ni colocarlas sin protección dentro de sobres)
- Para **necropsias** siempre llamar el día antes por teléfono; no remitir el cadáver si no se ha podido contactar conmigo el día anterior y confirmar la disponibilidad de este servicio
- Para todos los casos debe remitirse un **formulario de remisión de muestras** (<http://noahspath.com/index.php/servicio/ver/1/1/28/Instrucciones--Formularios-y-Precios.html>) preferiblemente por e-mail y con antelación a la llegada del paquete. El formulario es una plantilla de Word. Si es la primera vez que remites un caso incluye en los comentarios los **datos de facturación** (nombre de empresa o autónomo, dirección completa y NIF/CIF) y **número de cuenta bancaria para girar recibo**. Las facturas se envían por correo electrónico.

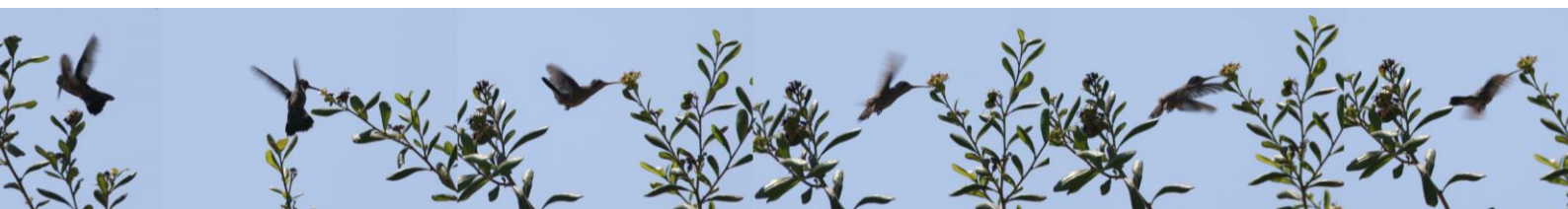

- En la web disponéis de la información sobre el **servicio de mensajería**
(<http://noahspath.com/index.php/servicio/ver/1/1/33/Servicio-de-mensajeria-para-recogida-de-muestras.html>)

- **Dirección para envío de muestras:**

Carles Juan-Sallés

Arquitecto Santiago Pérez Aracil 30 bajo
03203 Elche
Teléfono: 695561515
Horario de entrega: 10 a 14, y 17 a 20

Noah's Path

Carles Juan-Sallés, LV, Dipl ACVP
Patólogo Especializado en Fauna Exótica, Salvaje y de Zoo
www.noahspath.com

